

水中硝酸根离子测定试剂盒说明书

(货号: BP10372W 微板法 96 样 有效期: 6 个月)

一、指标介绍:

本法适合水中硝酸根离子的测定, NO₃-与 NO₂-在紫外区 210-220nm 均有吸收峰, 且浓度与吸光值成正比, 因此可采用紫外法吸收法直接检测水中 NO₃-含量, NO₂-的干扰可以加入氨基磺酸分解除去, 其它有机物干扰可以减去在 275nm 处测得吸光度乘以校正因子来消除。

二、试剂盒的组成和配制:

试剂组分	试剂规格	存放温度	注意事项
试剂一	液体 1.1mL×1 支	4℃保存	
试剂二	液体 6mL×1 瓶	4℃避光保存	
标准品	液体 1mL×1 支	4℃避光保存	1. 若重新做标曲,则用到该试剂; 2. 按照说明书中标曲制作步骤进行配制; 3. 溶解后的标品一周内用完。

三、实验器材:

研钵(匀浆机)、冰盒(制冰机)、台式离心机、可调式移液枪、水浴锅(烘箱、培养箱、金属浴)、 96 孔板(UV 板)、离心管、酶标仪、蒸馏水(去离子水、超纯水均可)。

四、水中硝酸根的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解样本自身情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂 浪费!

1、样本处理:

澄清液体水样直接检测,若有浑浊则离心后取上清液检测。

2、检测步骤:

- ①_x0001_ 酶标仪预热 30min 以上。
- ② x0001 在 EP 管中依次加入:

试剂组分 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)	
水样	500	0	
试剂一	10	10	
试剂二	50	50	
蒸馏水	440	940	

混匀, 静置 5min, 取 200µL 至 96 孔 UV 板中, 210nm 分别读吸 光值 A1、A2, 再于 275nm 分别读吸光值 A3、A4;

> A 测定管=A1-(A3×f), A 空白管=A2-(A4×f) △A=A 测定管-A 空白管 注: f 为矫正因素 2。


【注】若测定管于 210nm 的 A 值大于 1, 需用蒸馏水稀释水样使 A210nm 的值在 1 以内, 稀释倍数 D 需代入公式计算。

五、结果计算:

1、标准曲线方程: y = 0.036x - 0.0056; x 为标准品浓度 ($\mu g/mL$), y 为吸光值 $\triangle A$ 。

网址: www.bpelisa.com



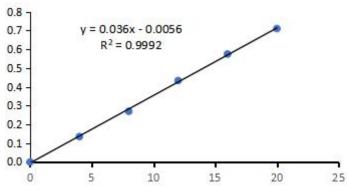

- 2、水中硝酸根离子 (NO₃⁻) 含量 (μg/mL) =(ΔA+0.0056)÷ 0.036×D =27.77×(ΔA+0.0056)×D
- 3、水中硝态氮(NO₃-N)含量(μg/mL)=(ΔA+0.0056)÷ 0.036÷62×14×D =6.3×(ΔA+0.0056)×D

附:标准曲线制作过程:

1 标准品母液浓度为 $100\mu g/mL$ 。将母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品, 例如: 0, 4, 8, 12,16, 20. $\mu g/mL$ 。也可根据实际样本调整标准品浓度。

2 标品稀释参照表如下:

吸取标准品母液 400uL,加入 1600uL 蒸馏水,混匀得到 20ug/mL 的标品稀释液待用。						
标品浓度	0	4	8	12	16	20
μg/mL	O O	T	0	12	10	20
标品稀释液	0	120	240	260	400	(00
uL	0	120	240	360	480	600
水 uL	600	480	360	240	120	0
各标准管混匀待用。						

3 依据测定管加样表操作,根据结果,以各浓度吸光值减去0浓度吸光值,过0点制作标准曲线。

试剂名称(μL)	标准管	0 浓度管(仅做一次)
标品	500	
试剂一	10	10
试剂二	50	50
蒸馏水	440	940

混匀, 静置 5min, 取 200µL 至 96 孔 UV 板中, 210nm 分别读 吸光值 A1、A2, 再于 275nm 分别读吸光值 A3、A4;

A 测定管=A1-(A3×f), A0 浓度管=A2-(A4×f) △A=A 测定管-A0 浓度管 注: f 为矫正因素 2。

网址: www.bpelisa.com